


# Loupe électronique CANDY 5 HD II



UNE LOUPE ÉLECTRONIQUE AVEC UNE POIGNÉE, DES BOUTONS BIEN VISIBLES ET D'EXCELLENTE QUALITÉ.

**La CANDY 5 HD II est d'utilisation aisée tenue à la main, posée sur les pieds intégrés ou sur son support. La mise au point est rapide et l'écran d'excellente qualité procure un confort de lecture accru.**

- Ecran de 5" (12,7 cm), grossissement de 1 x à 22 x
- Poignée ergonomique à plusieurs positions, gaucher / droitier
- Images vives et nettes (mise au point rapide)
- Une loupe électronique avec une autonomie 4 h

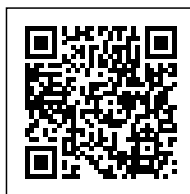

La CANDY 5 HD II est une loupe électronique compacte et très pratique pour un usage quotidien en cas de DMLA ou autre [maladie des yeux](#).

## Une loupe ergonomique

La poignée rotative autorise 3 positions pour une utilisation pour droitiers ou gauchers. La Candy 5 HD II est dotée de boutons assez gros, colorés et facilement accessibles pour les personnes atteintes de [DMLA](#).

La poignée intègre la batterie, ce qui allège l'écran et évite la fatigue au poignet des séniors.



**[Vidéos et produits Basse Vision](#)**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Loupe électronique CANDY 5 HD II

La loupe électronique CANDY 5 HD II peut se tenir à la main, à la manière d'une loupe en verre, ou posée sur le document. Dans ce dernier cas, la poignée est rabattue et le pied intégré déployé. De cette manière, le lecteur ne fatigue pas à tenir la loupe.

Enfin, le support livré permet de surélever la loupe et ainsi d'obtenir un grossissement plus faible.

## Image nette de près et à distance

Dotée d'un écran 5 pouces (12,7 cm de diagonale), la loupe électronique Candy 5 HDII convient aux personnes malvoyantes ayant besoin d'un champ de lecture élargi et d'un grossissement compris entre 1x et 22x.

Grâce au zoom numérique en continu, la CANDY 5 HDII est l'accessoire indispensable en cas de basse vision. La mise au point automatique est précise et rapide. Elle permet de lire un document tout comme regarder le numéro du bus ou de se guider dans les magasins.

## Pratique : le gel d'image

Vous voulez lire le prix d'une étiquette située en hauteur dans un magasin? Tendez le bras, gelez l'image, puis rapprochez la loupe électronique pour visualiser confortablement. Vous pouvez également enregistrer l'image dans la mémoire de la CANDY pour s'en rappeler plus tard.

## La CANDY 5 HD II est vraiment transportable

La pochette rigide livrée avec la loupe Candy 5 HD II protège des chocs. Elle facilite le transport et la protection dans un sac, à la ceinture ou dans un sac à doc.

Si besoin, un tour de coup se fixe à la loupe afin de l'avoir toujours à porter de main.



- Ecran LCD, HD 5 " (12,5 cm), antireflets.
- Grossissement 1x à 22x en continu.
- Vision de près, vision intermédiaire.
- Caméra centrale avec Autofocus automatique rapide.

# Loupe électronique CANDY 5 HD II

- Couleurs naturelles + 5 modes à fort contraste.
  - Luminosité 4 niveaux.
  - Fonction gel d'image, mémorisation de 5 images.
  - Affichage de l'heure en gros caractères.
- 
- Poignée orientable 3 positions, pour utilisation droitier ou gaucher.
  - Support de lecture intégré
  - Support de lecture complémentaire surélevé
- 
- Autonomie : 3.5h à 4h ( Batterie LiPo rechargeable)
  - Taille : 145 x 85 x 37 mm
  - Poids : 320g

Vous pouvez visionner diverses vidéo sur l'utilisation de la loupe électronique CANDY 5.

## **Réglage des couleurs et du mode fort contraste**

## **Réglage de la luminosité de l'écran**

## **Réglage de la mise en veille de la loupe électronique**

## **Affichage et réglage de l'heure**

## **Réglage de l'éclairage à LED**

## **Réglage de la focalisation, automatique, manuelle**



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**