

Loupe à main éclairante SIMONE

LOUPE À MAIN ÉCLAIRANTE RECTANGULAIRE –
VOTRE ALLIÉE POUR UNE VISION AMÉLIORÉE

Améliorez votre vision avec notre loupe à main éclairante rectangulaire. Avec son éclairage LED à trois niveaux et son design ergonomique, elle est parfaite pour les malvoyants et les personnes atteintes de DMLA



- Grande lentille rectangulaire avec grossissements X2 (+4D), et X6 (+20D) avec lentille ronde de 25mm
- Eclairage uniforme et puissante avec 3 niveaux d'intensité
- Légère et simple



Vous avez du mal à voir les détails ? La **loupe à main éclairante SIMONE** peut vous aider, ou aider votre proche malvoyant, à retrouver du confort visuel.

Notre loupe rectangulaire est spécialement conçue pour aider les personnes avec une basse vision ou DMLA à lire, à observer des détails, et à vivre plus confortablement. Grâce à son design et son utilisation simple, cette loupe de lecture vous aide à profiter d'une vision agrandie et sans effort.

Un design ergonomique pour une prise en main confortable

La poignée ergonomique assure une prise en main confortable, vous permettant de l'utiliser longtemps sans fatigue.

Vous apprécierez le confort qu'elle apporte, que vous l'utilisiez pour lire des



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe à main éclairante SIMONE

documents, consulter des notices, ou observer des détails sur des objets. La forme rectangulaire de la loupe à main rectangulaire vous permet de couvrir une plus grande surface en un seul coup d'œil, rendant ainsi la lecture plus fluide et moins fatigante.

La loupe à main éclairante SIMONE

L'éclairage LED intégré offre trois niveaux d'intensité pour répondre à vos besoins spécifiques que ce soit dans des environnements sombres ou lumineux ou pour augmenter le contraste du texte. Très souvent, si vous utilisez une loupe pour DMLA, le besoin d'un contraste plus élevé des caractères est nécessaire en plus du grossissement

Les 50 LED situées autour de la lentille garantissent un éclairage uniforme, vous permettant de voir chaque détail avec netteté et clarté.

Loupe de lecture avec 2 lentilles pour un grossissement adapté

La grande lentille de 65 mm x 110 mm offre un grossissement de 2x, idéale pour la lecture de documents ou de journaux.

Si vous avez besoin d'un grossissement plus fort, la petite lentille de 25 mm offre un grossissement de 6x, idéale pour les détails plus fins. Cette flexibilité vous permet d'adapter la loupe à main rectangulaire à vos besoins visuels spécifiques.

Facilité d'utilisation et de maintenance

Il suffit d'appuyer sur un seul bouton pour allumer la loupe DMLA et choisir l'intensité d'éclairage qui vous convient le mieux.

Avec ses 3 piles AAA, cette loupe de lecture SIMONE est toujours prête à l'emploi, facile à utiliser et à entretenir, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le changement des piles est rapide et simple, garantissant que votre loupe fonctionne toujours quand vous en avez besoin.

Une loupe à main éclairante et rectangulaire

Cette loupe de lecture éclairante très utiles en cas de DMLA faible est un outil pratique qui vous aide à mieux voir au quotidien, que ce soit pour lire ou observer des détails.

Que vous soyez atteint de DMLA, forte presbytie, malvoyant, ou que vous cherchiez simplement une solution pour rendre la lecture et l'observation d'objet plus faciles, cette loupe à main est faite pour vous.




Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe à main éclairante SIMONE

Vous hésitez sur le choix d'une loupe ?
Voici un Quiz pour vous aider

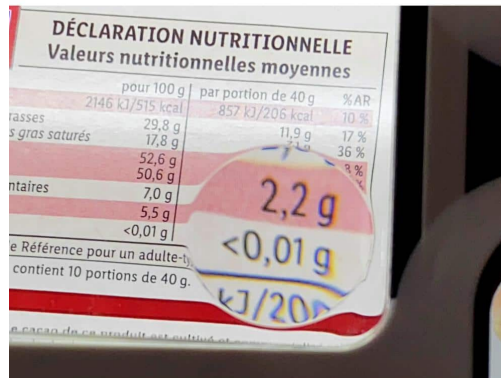

| | pour 100 g | par portion de 40 g | % AR |
|---------------------|------------------|---------------------|---------|
| Énergie | 2146 kJ/515 kcal | 857 kJ/206 kcal | 10 % |
| Protéines | 29,8 g | 11,9 g | 17 % |
| Glucides | 17,8 g | 7,1 g | 14 % |
| - dont gras saturés | 52,6 g | 21,0 g | 36 % |
| Lipides | 50,6 g | 20,2 g | 30 % |
| - dont saturés | 7,0 g | 2,8 g | 4 % |
| Sels | 5,5 g | 2,2 g | 3 % |
| - dont sodium | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 % |

CARACTÉRISTIQUES DE LA LOUPE À MAIN ÉCLAIRANTE RECTANGULAIRE SIMONE

- Grande lentille rectangulaire de 11 cm x 6,5cm , grossissement de 2X (4 Dioptries)
- Petite lentille ronde de 25 mm , grossissement 6X (20 Dioptries)
- Hauteur d'utilisation optimale :
 - avec grossissement 2x : 25 cm
 - avec grossissement 6X : 5 cm
- Eclairage avec 50 led répartie autour de la loupe. 3 puissance d'éclairage par appui sur le bouton tactile de la poignée.
- Réglage de la luminosité : oui
- Poids : 190 g
- Alimentation par 3 piles AAA

Comment allumer la loupe SIMONE?

Pour allumer la loupe, il vous suffit d'appuyer sur le bouton unique situé sur la poignée. Vous pouvez régler l'intensité de l'éclairage en appuyant plusieurs fois.

Quel type de piles la loupe utilise-t-elle ?

La loupe fonctionne avec 3 piles AAA. Elles sont faciles à changer et largement disponibles dans le commerce.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe à main éclairante SIMONE

Quel est le grossissement de la loupe rectangulaire SIMONE?

La grande lentille offre un grossissement de 2x, tandis que la petite lentille incrustée propose un grossissement de 6x.

Oui, cette loupe est idéale pour la lecture de documents, la consultation de notices, ou l'observation de détails sur des objets.

L'éclairage LED est-il réglable ?

Oui, l'éclairage LED dispose de trois niveaux d'intensité, vous permettant de l'ajuster selon vos besoins.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr